




eczane otomasyon programı

# Eczanem

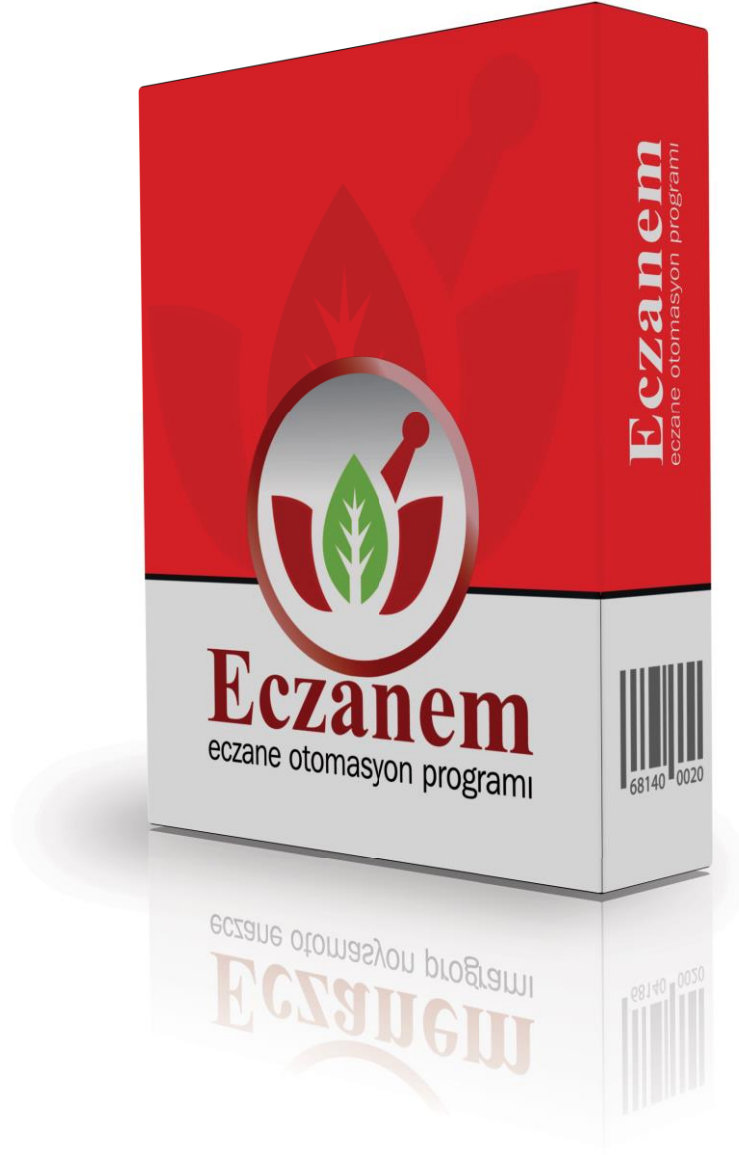

**Eczanem**

**Sayım Notları**



eczane otomasyon programı

# Eczanem



**Eczanem®**  
Eczane Otomasyon Programı

ÖNCELİKLE SAYIM ÖNCESİ;

SONLANDIRILMAMIŞ BÜTÜN REÇETELER SONLANDIRILIR

1.AKTARILMAYAN TÜM REÇETELER AKTARILIR

2.AKTARILMAYAN FATURALAR AKTARILIR

3.SONLANDIRILMAMIŞ REÇETELERDEKİ EKSİK İLACIN DIŞINDAKİ TÜM ÜRÜNLERİ SAYIM EKRANINA AKTARMAK GEREKİR.

4.SAYIM ÖNCESİ SONLANDIRILMAYAN REÇETELER REÇETE İÇERİSİNDE HİÇ İLAÇ YOKSA SİLİNİP SAYIM SONRASINDA

TEKRAR GİRİLECEK YADA SİLİNECEK DURUMDA DEĞİLSE

SAYIMDAN SONRA O REÇETELERİN REÇETE KAYIT TARİHLERİ PROGRAMDAKİ REÇETE KISMINDAN DEĞİŞTİRİLİR




eczane otomasyon programı

# Eczanem

## ANA MAKİNADAN

1. SERVİS MENÜSÜNDEN --> DOSYA YEDEKLEME İŞLEMİ BAŞLATILIR.

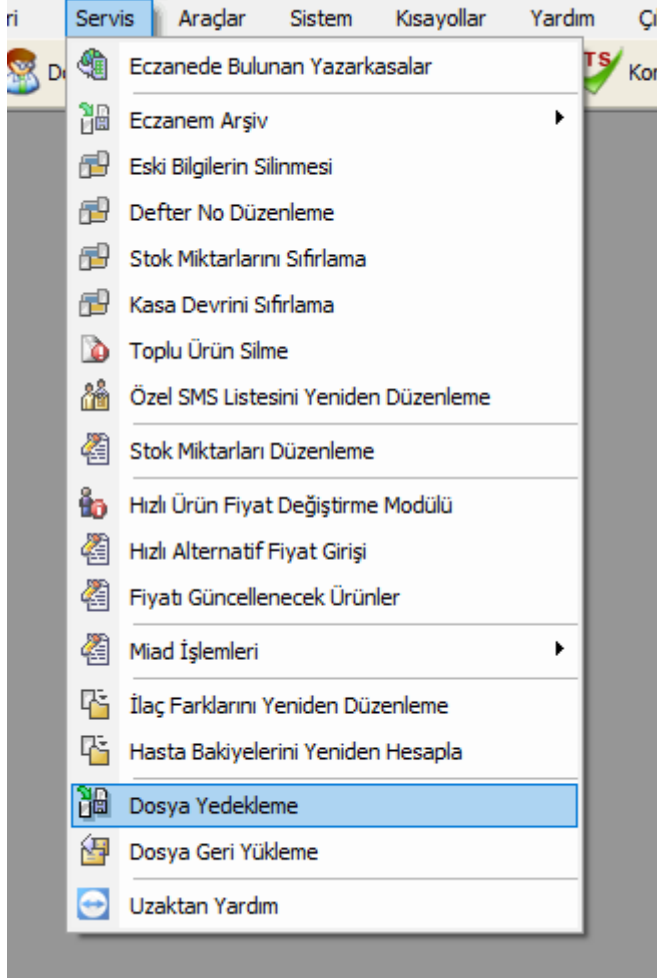





eczane otomasyon programı

# Eczanem


2. DİĞER MENÜSÜNDEN --> ECZANE STOK SAYIMINA TIKLANIR.

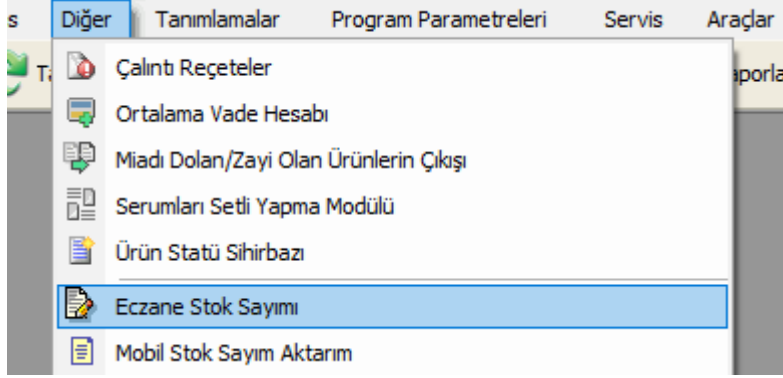

3. SAYIM BÖLÜMÜNE TIKLAYARAK YENİ SAYIM SEÇİLİR

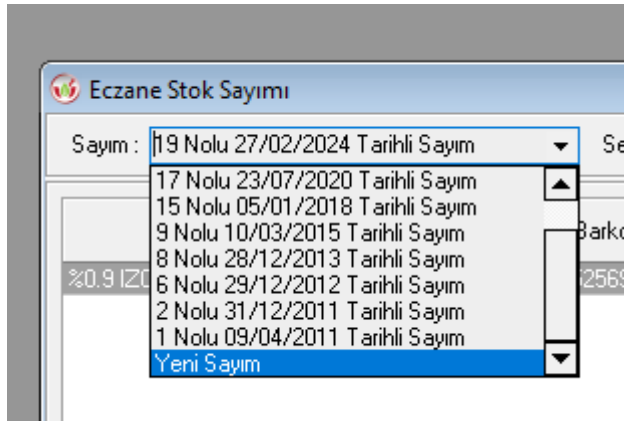

GELEN İLK UYARIYA DEVAM

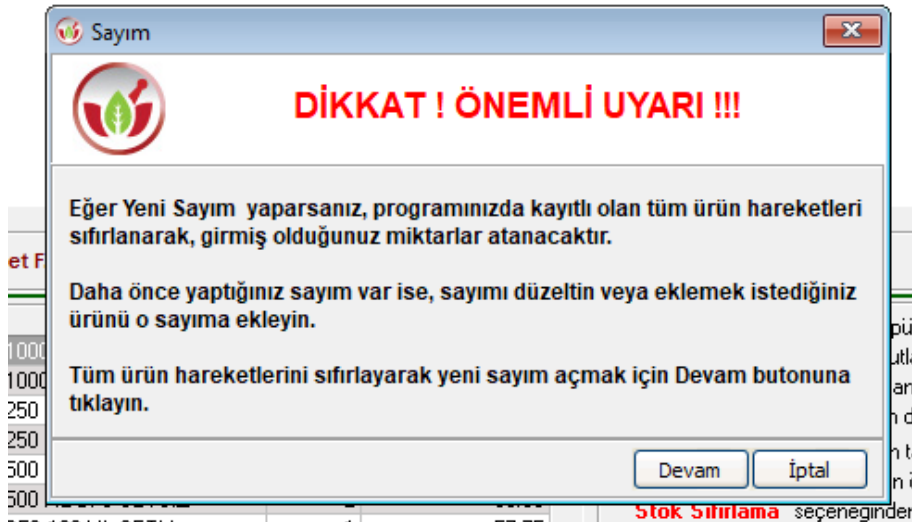



eczane otomasyon programı

# Eczanem

KULLANICI ADI VE ŞİFRE GİRİLMESİ GEREKİR

İKİNCİ UYARIDA SAYIMLA BİRLİKTE SATIŞ YAPILACAKSA EĞER " EVET " , YAPILMAYACAKSA " HAYIR " SEÇİLİR



eczane otomasyon programı

# Eczanem

KAREKODLU SAYIM KUTUCUĞUNA TIKLANIR ANA MAKİNADAN 1 TANE KAREKOD OKUTULUR.

Eczane Stok Sayımı

Sayım : Yeni Sayım Seçim : Bu Bilgisayardan Sayılan Ürünler

| Ürün Adı                                        | Barkod | Say.Önce.<br>Miktar | Fiyatı | Say.Öncesi<br>Tutar | Sayım | Son Değer             | Sayım Tutarı | Fark              | Karekod |
|-------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|-------|-----------------------|--------------|-------------------|---------|
| Ürün Sayısı :                                   | 0      | Etiket F.Top. :     | 0.00   | Kamu F.Top. :       | 0.00  | Maliyet (Kdv Dahil) : | 0.00         | Sayım Karşılaştır |         |
| Kutu Sayısı :                                   | 0      |                     |        |                     |       |                       |              |                   |         |
| Ürün Adı                                        | Miktar | Fiyatı              |        |                     |       |                       |              |                   |         |
| %0.9 İZOTONİK NaCl ÇÖZELTİSİ 1000 ML BFS SETLİ  | -34    | 80.77               |        |                     |       |                       |              |                   |         |
| %0.9 İZOTONİK NaCl ÇÖZELTİSİ 1000 ML BFS SETSİZ | -6     | 81.17               |        |                     |       |                       |              |                   |         |
| %0.9 İZOTONİK NaCl ÇÖZELTİSİ 250 ML BFS SETLİ   | -2     | 42.33               |        |                     |       |                       |              |                   |         |
| %0.9 İZOTONİK NaCl ÇÖZELTİSİ 250 ML BFS SETSİZ  | 1      | 34.37               |        |                     |       |                       |              |                   |         |
| %0.9 İZOTONİK NaCl ÇÖZELTİSİ 500 ML BFS SETLİ   | -2     | 76.44               |        |                     |       |                       |              |                   |         |
| %0.9 İZOTONİK NaCl ÇÖZELTİSİ 500 ML BFS SETSİZ  | -2     | 65.09               |        |                     |       |                       |              |                   |         |
| %0.9 İZOTONİK NaCl ÇÖZELTİSİ BFS 100 ML SETLİ   | -1     | 57.75               |        |                     |       |                       |              |                   |         |
| %0.9 İZOTONİK NaCl ÇÖZELTİSİ BFS 100 ML SETSİZ  | -4     | 44.99               |        |                     |       |                       |              |                   |         |
| %0.9 İZOTONİK NaCl ÇÖZELTİSİ BFS 150 ML SETLİ   | -2     | 39.11               |        |                     |       |                       |              |                   |         |
| %0.9 İZOTONİK NaCl ÇÖZELTİSİ BFS 150 ML SETSİZ  | -2     | 31.07               |        |                     |       |                       |              |                   |         |
| %0.9 SODYUM KLORÜR 10 ML 10 AMPUL               | -57    | 146.58              |        |                     |       |                       |              |                   |         |
| %0.9 SODYUM KLORÜR 10 ML 100 ML SÖLÜSYON SETSİZ | -4     | 68.93               |        |                     |       |                       |              |                   |         |
| %0.9 SODYUM KLORÜR PVC 100 ML SÖLÜSYON          | -10    | 44.99               |        |                     |       |                       |              |                   |         |
| %0.9 SODYUM KLORÜR PVC 150 ML SÖLÜSYON          | -10    | 47.20               |        |                     |       |                       |              |                   |         |

Toplu Karekod Girişi ☒ Karekodlu Sayım ☐ Miad girişi aktif olsun.

Excel PDF Seç Kapat

[Ctrl + F2] Sayım Kaydet [Ctrl + F11] Maliyet Hesaplama [Ctrl + M] Miad Girişi [F2] Tamam [F5] Ürün Ekle [F7] Satır Sil [F10] Yazdır [F11] Excel [F12] PDF [Esc] Vazgeç/Kap

1. Eğer eczanenizde emanet küpürünüz varsa sayım değerlerini stoklara yansıtmadan önce mutlaka emanet satışlarınızı girmiş olmalısınız. Aksi halde, sayımdan sonra gireceğiniz emanetleriniz, stok eksilmesi nedeni ile sayım değerlerinizi bozacaktır.

2. Sayım öncesi stok miktarlarının tamamını sıfırlamak isterseniz sayım miktarlarını kaydetmeden önce **Servis** menüsündeki **Stok Sıfırlama** seçeneğinden stok miktarlarını sıfırlamanız gerekmektedir. Stok miktarları sıfırlanmadığı takdirde sayım miktarı girilmemiş ürünlerdeki sayım öncesi miktarlar olduğu gibi kalır.

3. Kaydetme sırasında, diğer bilgisayarlarda herhangi bir işlem yapılmaması gerekir.

4. Yukarıda belirtilen tüm işlemleri yaptığınızdan emin iseniz, sayım işlemi sonunda Kaydet butonuna basarak miktarları aktarabilirsiniz.

DAHA SONRA TERMİNALLERDEN GÜNCEL TARİHLİ SAYIMI SEÇEREK SAYIMA DEVAM EDİLİR.

Eczane Stok Sayımı

Sayım : 20 Nolu 13/09/2025 Tarihli Sayım Seçim :

| Ürün Adı                                       | Barkod     |
|------------------------------------------------|------------|
| %0.9 İZOTONİK NaCl ÇÖZELTİSİ 1000 ML BFS SETLİ | 8699525690 |



eczane otomasyon programı

# Eczanem

BARKODLU VE İTRİYAT ÜRÜNLERİNİ SAYARKEN KAREKODLU SAYIM İŞARETİ KALDIRILIR, MİAD TAKİBİ YAPILACAKSA EĞER SADECE MİAD GİRİŞİ AKTİF OLSUN KUTUCUĞU İŞARETLENİR VE DİREK EKRANA OKUTULUR

BÜTÜN SAYIM BİTTİKTEN SONRA SAYIM EKRANLARI KAPATILIR.

AYRICA BÜTÜN SAYIM BİTMEDEN KAYDETME İŞLEMİNİ HİÇ BİR MAKİNADAN YAPMAYINIZ.

SAYIM BİTTİĞİ ZAMAN ANA MAKİNA HARIÇ DİĞER MAKİNALARI KAPATINIZ.

SONRASINDA SERVİSTEN STOK MİKTARINI SIFIRLAMA İŞLEMİ YAPILIR

DİĞER MENÜSÜNDEN --> ECZANE STOK SAYIMI

SEÇİM BÖLÜMÜNDEN TÜM BİLGİSAYARLARDAN SAYILAN ÜRÜNLER SEÇİLİR

CTRL+F11 İLE MALİYET DÜZENLEME AÇILIR.

SON ALIŞ FATURALARINA GÖRE MALİYETİ SEÇİP BAŞLAT TIKLANIR

BİTİNCE CTRL+F2 İLE SAYIM KAYDEDİLİR.

BU AŞAMA DA EKRAN DONMUŞ GİBİ OLUR SORUN OLMAZ SAYIMI KAYDEDİYOR, KENDİSİ KAPANANA KADAR BEKLEYİNİZ.

**\*\*NOT: EMANETTEKİ KÜPÜRLER SAYIMA DAHİL EDİLMEZ. ONLAR SATIŞ OLARAK ÜRÜN HAREKETLERİNDE VE HASTA CARİLERİNDE KAYITLIDIR.**

**\*\* FATURA GELİRSE DEPOLARDAN FATURALARI AKTARIN GELEN ÜRÜNLERİ DE SAYIMA OKUTUN.**

**\*\* SAYIMLA AYNI GÜN İÇERİSİNDE TAKAS ALIP VERME EMANET SATIŞ İŞLEMİ YAPILMAMALIDIR.**

**\*\* SABAH EMANET SATIŞ YAPTIYSAYINIZ EĞER SAYIMA ÖĞLEDEN SONRA BAŞLADIYSAYINIZ SAYIMLA AYNI TARİHLİ OLAN EMANETLERİNİZİ SAYIMA OKUTMANIZ GEREKİR.**



eczane otomasyon programı

# Eczanem



# Eczanem

eczane otomasyon programı



[www.bilgegrup.com.tr](http://www.bilgegrup.com.tr)



**EczanemOffical**



[info@bilgegrup.com.tr](mailto:info@bilgegrup.com.tr)



**@EczanemPrg**